


# Vblock®

## AGO PER BLOCCO PARACERVICALE UTERINO UTERINE PARACERVICAL BLOCK NEEDLE

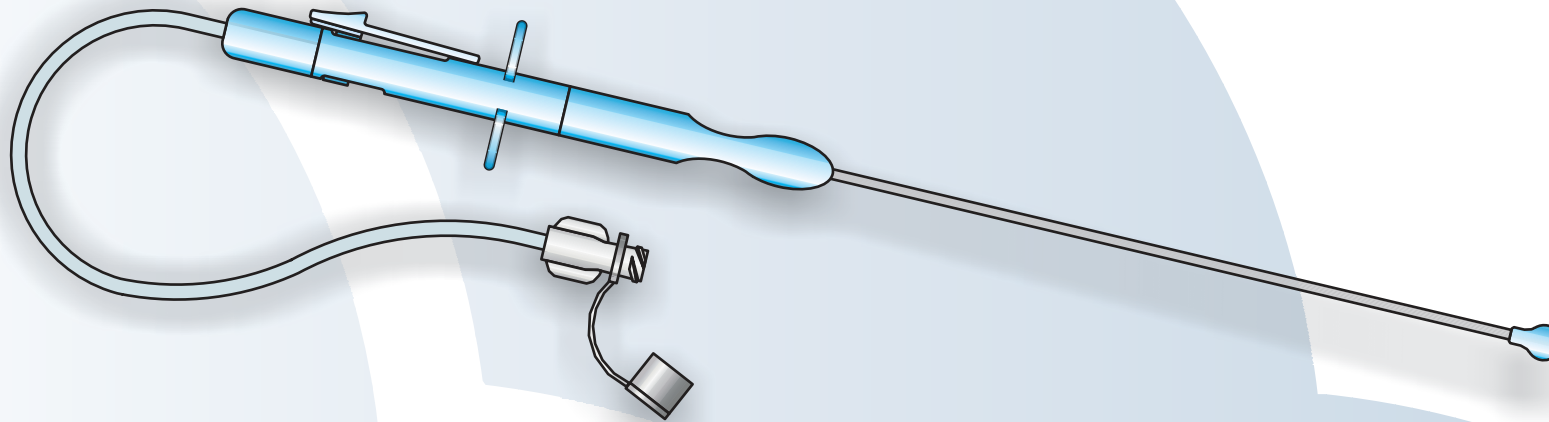

Il dispositivo è stato studiato e realizzato per l'esecuzione semplice, sicura, affidabile ed efficace del blocco paracervicale uterino.

E' essenzialmente costituito da:

- Impugnatura alla cui estremità prossimale trova posto un meccanismo a slitta per la fuoriuscita precisa e sicura dell'ago; la fuoriuscita completa dell'ago viene segnalata dalla comparsa di un marker rosso (questo marker è nascosto dalla slitta allorchè la stessa si trova in posizione di riposo); la retrazione dell'ago viene effettuata azionando l'apposito tasto collocato in posizione opposta alla slitta.
- Cannula in acciaio all'interno della quale trova posto l'ago per l'esecuzione della procedura. L'estremità distale di tale cannula termina con una protezione sferoidale la cui funzione è quella di essere punto di contatto e di fermo, atraumatico, con il fornice vaginale;
- Ago da 20 G a punta obliqua. La fuoriuscita dell'ago dalla sferoide terminale (comparsa del marker rosso) è di 4 mm;
- Prolunga in PVC flessibile, antikinking, lunga 200 mm, terminante con connessione Luer lock femmina munita di tappino.
- Lunghezza totale del dispositivo, esclusa la prolunga in PVC, 270 mm.

Sterile e monouso


Device designed and realized for an easy, safe, reliable and successful execution of the uterine paracervical block.

It consists of:


- a handle at the proximal end of which a slide mechanism is placed to permit a safe and precise release of the needle tip outside a protective sheath; a red marker indicates the right and definitive release of the needle tip (this marker is hidden by the slide mechanism when at rest). The needle tip will return inside the protective sheath pushing the button placed just at the opposite side of the slide mechanism.
- A stainless steel cannula (protective sheath) inside which the needle to perform the procedure is placed. The distal end of this cannula presents a protective plastic ball, so it is possible to ensure a steady and atraumatic contact with the junction of the cervix and the vagina
- 20 Ga, oblique tip stainless steel needle. The release of the needle tip outside the protective plastic ball is 4 mm (and the red marker appears)
- PVC, extension line, 200 mm. length with female Luer lock and cap.
- the total length of the device is 270 mm (the PVC extension is excluded)

Sterile and disposable.

DISPOSITIVO A RIPOSO - AGO RETRATTO  
DEVICE AT REST - NEEDLE IN

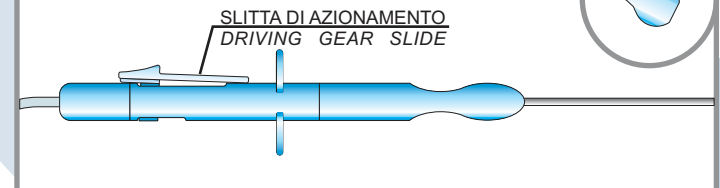

DISPOSITIVO ATTIVATO - AGO FUORIUSCITO  
ACTIVATED DEVICE - NEEDLE OUT

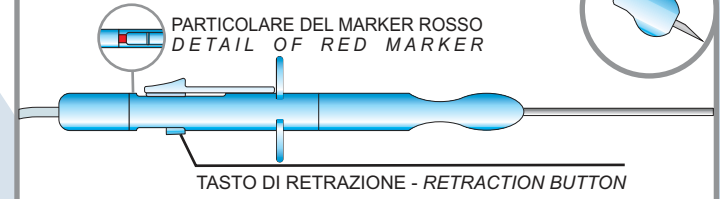

TASTO DI RETRAZIONE - RETRACTION BUTTON

Codice  
Order number

Quantità per confezione  
Package quantity

2-PB02N

10